

# ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE MATERIAL AO DB

Tabela referente às etiquetas impressas, amostras e tubos, junto com seus respectivos códigos e materiais.

## Tubos:

| CÓDIGO | TUBO                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| TBHEPA | Tubo de heparina                                                        |
| TBCITR | Tubo de citrato                                                         |
| TBAMAR | Tubo de transporte ou soro com gel separador                            |
| TAMBAR | Coletar no gel ou em transporte, centrifugar e transferir para um âmbar |
| TTRACE | Tubo Trace                                                              |
| TBEDTA | Tubo de EDTA                                                            |

## Materiais:

| CÓDIGO | MATERIAL                            |
|--------|-------------------------------------|
| SORO   | Soro refrigerado                    |
| PLACON | Plasma congelado                    |
| SRCGPL | Soro congelado e protegido da Luz   |
| SOROC  | Soro congelado                      |
| SOROP  | Soro protegido da luz               |
| SANTAM | Sangue total ambiente               |
| SANTOT | Sangue total refrigerado            |
| URI24H | Urina 24hs                          |
| URICON | Urina congelada                     |
| URFNJT | Urina final da jornada de trabalho  |
| URINJT | Urina início da jornada de trabalho |
| SANCAP | Sangue capilar (papel filtro)       |


## Forma ideal de envio das amostras ao DB:



De acordo com o tipo de material as amostras devem ser embaladas em diferentes sacos de transporte (sangue, soro, urina e diversos). Sempre identificar a temperatura adequada para o transporte (Resfriado, congelado ou temperatura ambiente).

Para saber mais informações, acesse o Guia de Exames no site do DB: [diagnosticosdobrasil.com.br](http://diagnosticosdobrasil.com.br)

## Etiqueta e posição no tubo:

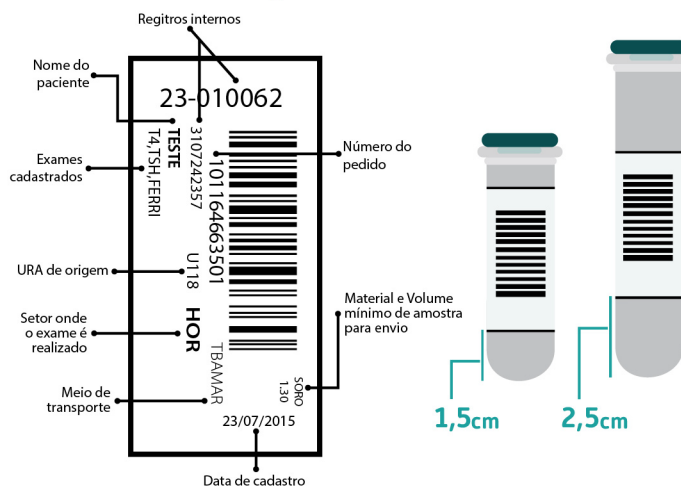

Independente da marca que seu laboratório utilizar, a etiqueta deverá ser colocada na vertical, posicionada cerca **de 1,5 cm ou 2,5 cm da base do tubo**, de acordo com a imagem acima.

## Embalagens para acondicionar as amostras para envio:

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRANSPARENTE</b> |  | Transporte em geral, também para identificar amostras ambientais e refrigeradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AMARELA</b>      |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Embalagem primária, de alta gramatura, para acondicionamento direto de amostra biológica. Possui fechamento tipo zip e canaleta para garantia de vedação.</li> <li>Embalagem secundária, de gramatura intermediária, para armazenar a embalagem primária. Este saco não é adequado para receber diretamente a amostra.</li> </ol> |
| <b>AZUL</b>         |  | Materiais de baixa estabilidade incluindo citometria de fluxo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VERDE</b>        |  | Materiais congelados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VERMELHA</b>     |  | Materiais de Urgência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ROXA</b>         |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Uso exclusivo exames de biologia molecular – Tubos</li> <li>Uso exclusivo exames de biologia molecular – Frascos de urina e secreções</li> </ol>                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRETA</b>        |  | Materiais do exame toxicológico do cabelo ou pelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**IMPORTANTE:** As amostras devem ser entregues separadamente ao motorista e devem estar identificadas conforme a sua temperatura.

**EX: REFRIGERADO, CONGELADO**