

TODOS OS DADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS


Instruções de coleta e envio de material para exames de hemograma

Visando garantir a qualidade dos nossos processos, o DB informa que o exame hemograma (HEMO) deverá ser encaminhado obrigatoriamente junto com a lâmina da extensão sanguínea.

Isso se deve ao fato de as células permanecerem viáveis por no máximo 24 horas após a coleta. Após este prazo, as células entram em processo degenerativo, prejudicando e muitas vezes inviabilizando o resultado final.



Esquema para confecção da lâmina:

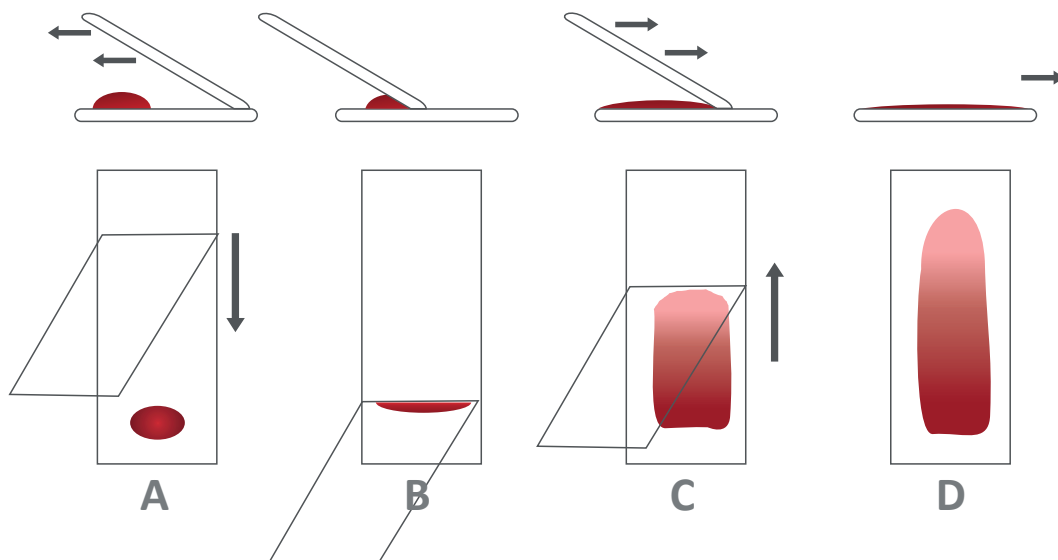

Além disso, o volume mínimo solicitado de 3ml deve ser respeitado. Não devem ser feitas aliquotas, pois isso interfere diretamente na quantificação das hemácias e plaquetas.