

Citologia Cérvico-Vaginal em Meio Líquido [CITO]

Material: Raspado de colo de útero (ecto e endocervical).

Volume Mínimo:

SurePath; GynoPrep, LiquiPrep: 10 ml
Cell Preserv: 18 ml
ThinPrep: 20 ml

Método: Enriquecimento celular/Citologia.

Meio de coleta: SurePath, GynoPrep, LiquiPrep, Cellpreserv, ThinPrep.

Critérios de rejeição:

- Frasco danificado;
- Frasco sem identificação.

Documentos:

- Requisição Médica;

Estabilidade da amostra: Em média até 30 dias em temperatura ambiente *Consultar o manual referente a cada metodologia (fornecedor).

Transporte: Em temperatura ambiente.


Acondicionamento, embalagem e fixação:

SurePath, GynoPrep, LiquiPrep : Destacar a ponteira da escova e espátula dentro do frasco para envio em conjunto.

O frasco deve ser identificado com nome da paciente e data de nascimento. Utilize a etiqueta de amostra.


Após a coleta, realizada com Espátula de Ayre e Escova Endocervical ou Escova Combinada, a amostra é imersa no meio líquido preservativo, conforme instrução do fornecedor.

1. COLETAR

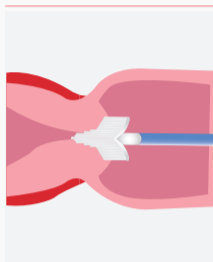

Posicione as cerdas mais longas no canal cervical e faça a coleta girando a escova no sentido horário mantendo leve pressão;

2. DESTACAR

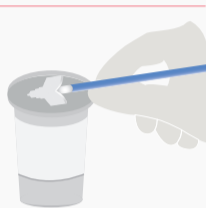

Destaque a ponta da escova, depositando-a dentro do frasco;

3. ENVIAR



Feche adequadamente o frasco, previamente identificado, e faça o envio ao laboratório acompanhado da requisição.


*Consultar as instruções de uso do dispositivo de coleta utilizado

-ThinPrep e Cell Preserv : Enxaguar a espátula e escova no meio líquido de forma vigorosa. Descartar escova e espátula


O frasco deve ser identificado com nome e data de nascimento da paciente.




1 - Identifique o frasco com o nome completo da paciente e data de nascimento;

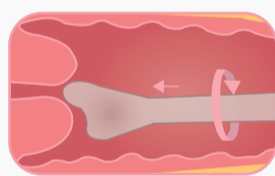


2 - Obtenha uma amostra adequada da ectocérvice utilizando a espátula plástica, girando 360° enquanto mantém em contato com a superfície do colo;

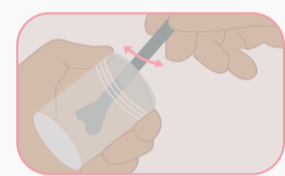


3 - Mergulhe a espátula plástica no frasco, enxaguando-a vigorosamente. Descarte a espátula.

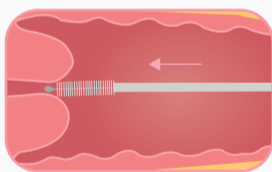

4 - Obtenha a amostra da região endocervical utilizando a escova no canal endocervical até que apenas as últimas cerdas fiquem expostas e gire numa única direção cerca de 180°.

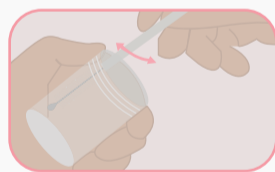


5 - Enxague a escova imediata e vigorosamente, agitando-a no mesmo frasco e rodando a escova na solução cerca de 10x. Descarte a escova;

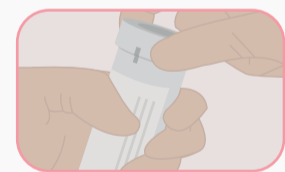

6 - Feche adequadamente o frasco.

Você pode agrupar vários frascos, adequadamente vedados e identificados com etiqueta, e acondicioná-los numa bag secundária (Cód. P: 24652; Cód. G:24653).

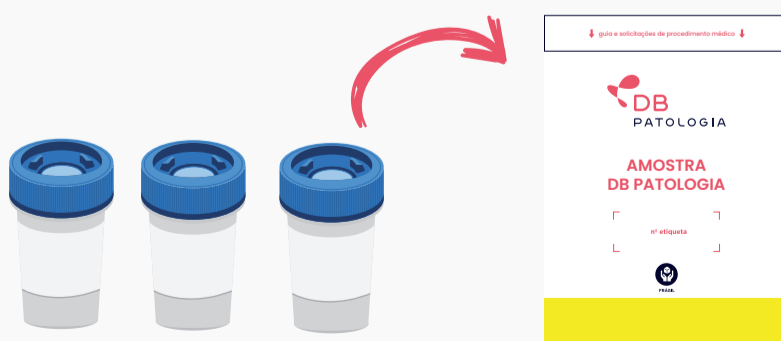

Para os exames de citologia ginecológica, enrole o pedido médico no tubete para envio.

